


Provinoxx - Bettkantensystem

Das Provinoxx informiert mittels Druckauslösung das Betreuungspersonal, wenn der Patient das Bett zu verlassen versucht. Dieses Frühwarnsystem vermindert das Sturzrisiko körperlich beeinträchtigter Menschen, indem es bereits vor dem Verlassen des Bettes ein Alarmsignal kabellos via Funk oder Kabelanschluss an die Rufanlage sendet und das Pflegepersonal informiert.

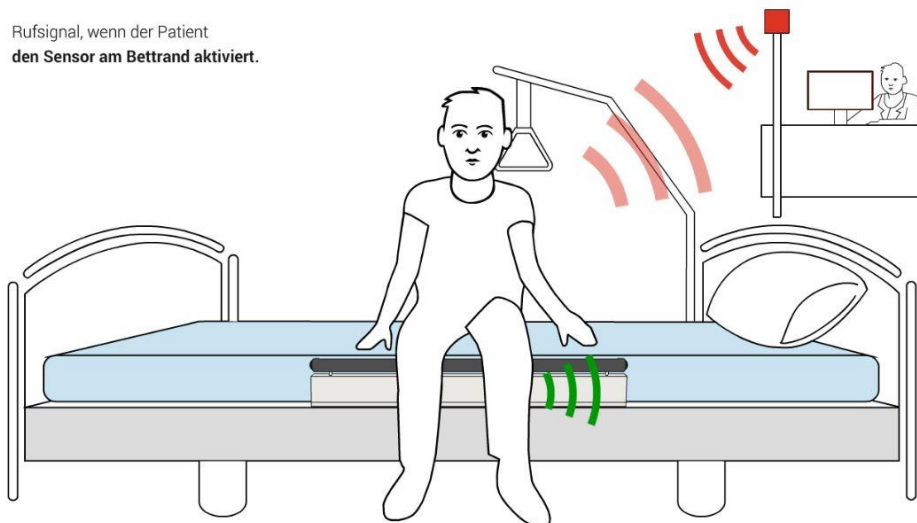


Anwendungsbereiche und Funktionen:

Provinoxx wurde vorwiegend für den Einsatz in Alters- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und Psychiatrien, sowie für betreutes Wohnen konzipiert.

Die dort notwendige Pflege und Beaufsichtigung von dementen und Sturzgefährdeten Bewohnern stellt für das Betreuungspersonal einen erhöhten Pflegeaufwand dar, Provinoxx ist die ideale Unterstützung: Sturzrisiken sowie Gefahren, die sich durch Orientierungslosigkeit ergeben, können erheblich verringert werden.

Sobald die Person das Bett verlassen will und den Sensor im Provinoxx belastet, wird über den Funksender oder Kabelanschluss ein Alarm an die Rufanlage oder Funkgong gesendet.

Das kabellose Funksystem ermöglicht einen flexiblen Einsatz des Provinoxx.

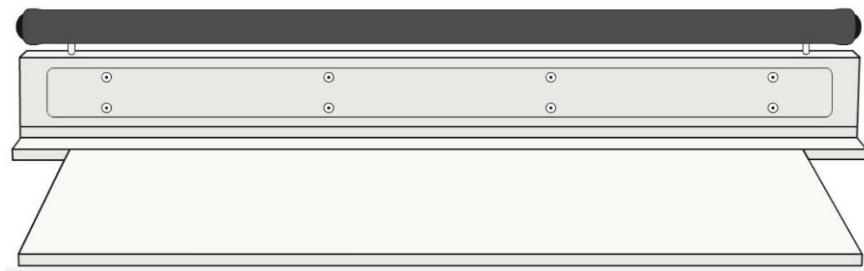

Technische Daten:

Masse (L x B x H)

Standartmass: 800x250x120mm

Gewicht (kg)

5 kg

Farbe

weiss

Auslösegewicht

mindestens 7 kg

Anwendungsbereich

unter der Matratze

Inkontinenzschutz

waschbar bis 95°

Reinigung

handelsübliche Desinfektionsmittel (max. 70 Vol.% Alkohol)

Anbindung

verschiedene Funksysteme möglich oder Kabelanschluss